



## Gebrauchsanleitung

1. Schrauben Sie den Drehverschluß oben von der DentiAll™ ab.
2. Stecken Sie die mitgelieferte Zahnbürste oder eine andere handelsübliche Handzahnbürste mit dem Griff nach unten in die Öffnung, so daß die Borsten in die entgegengesetzte Richtung zum Ein-/Ausschaltknopf zeigen. Ggf. vorsichtig drehend einführen.
3. Schieben Sie den Drehverschluß über die Handzahnbürste und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn fest.
4. Tragen Sie wie gewohnt Zahncreme auf die Bürste auf.
5. Drücken Sie den Einschaltknopf „on“ erst dann, wenn Sie die Zahnbürste im Mund haben.
6. Reinigen Sie die Zahnbürste nach dem Putzen unter fließendem Wasser während sie noch eingeschaltet ist und trocknen Sie diese anschließend mit einem sauberen Handtuch.
7. Drücken Sie dann den Ausschaltknopf „off“

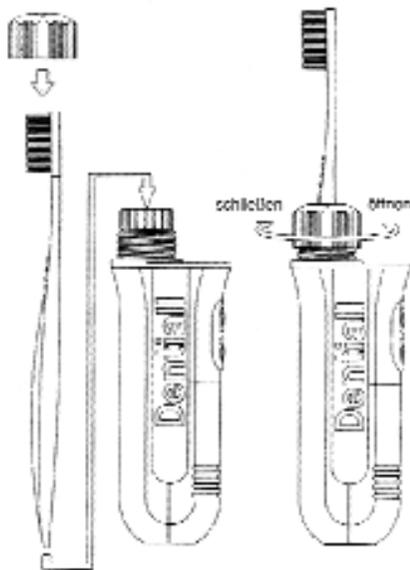

## Batteriewechsel

1. Drücken Sie den plättchenförmigen Hebel unten an der Zahnbürste und schieben Sie währenddessen die Batterieabdeckung nach unten weg.
2. Entfernen Sie die Batterie und setzen Sie eine neue ein, so daß der Pluspol nach unten zeigt.
3. Setzen Sie die Batterieabdeckung auf die Zahnbürste auf und schieben Sie diese nach oben bis sie einrastet.
4. Bitte entsorgen Sie die entladenen Batterien nicht im Hausmüll, sondern nur an den dafür vorgesehenen Stellen.

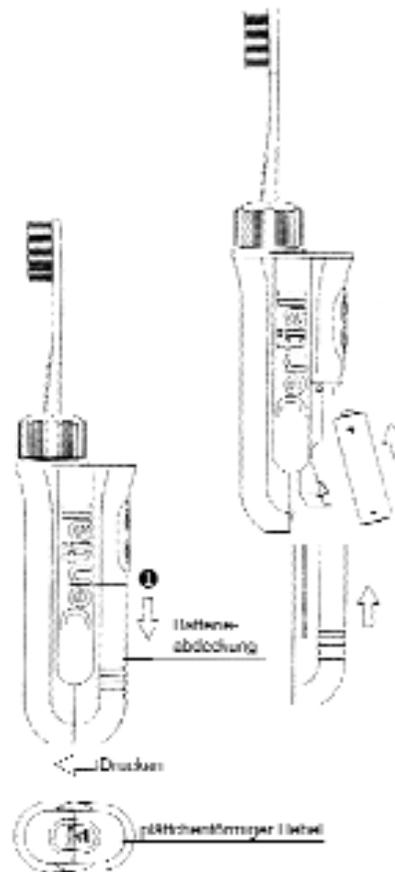

## Sicherheitshinweise



Bitte benutzen Sie keine Zahnbürste, deren Handstück dicker als 1,2 cm ist.

Schützen Sie die Batterie vor großer Hitze

Versichern Sie sich vor jedem Putzen, daß die Batterieabdeckung vollständig geschlossen ist, da die DentiAll™ nur dann gegen das Eindringen von Wasser geschützt ist.

Kinder unter 12 Jahren sollten die DentiAll™ nur unter der Anleitung eines Erwachsenen benutzen.

Wenn Sie in den vergangenen zwei Monaten eine Zahn- oder Kieferoperation hatten, sollten Sie vor der Nutzung der DentiAll™ Ihren Zahnarzt fragen.

Geringfügiges Zahnfleischbluten während der ersten Tage sind in seltenen Fällen möglich. Sollte dies jedoch verstärkt auftreten oder länger als 5 Tage anhalten, konsultieren Sie bitte Ihren Zahnarzt.

DentiAll™ Deutschland  
Langenfelder Straße 93  
D - 22769 Hamburg  
[www.dentiAll.de](http://www.dentiAll.de)